

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2020
ZASADY OCENIANIA**
*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

 Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych**

 Oznaczenie arkusza: **Z.02-01-20.01-SG**

 Oznaczenie kwalifikacji: **Z.02**

 Numer zadania: **01**

 Wersja arkusza: **SG**
**PODSTAWA PROGRAMOWA
2012**
Wypełnia egzaminator

 Kod ośrodka –

 Kod egzaminatora

 Data egzaminu

Dzień *Miesiąc* *Rok*

 Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*											Numer stanowiska	

 * w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

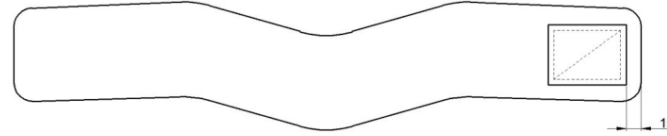
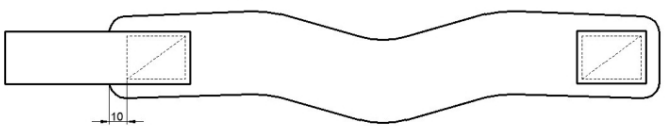
Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaz niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odrębnie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

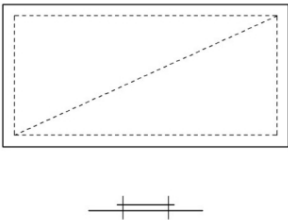
Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Kołnierz Schanza

1	Długość całkowita kołnierza wynosi 49 cm (+/- 0,5 cm)																			
2	Szerokość kołnierza w 3 najwyższych punktach wynosi 8 cm (+/- 0,5 cm)																			
3	Wąż ortopedyczny jest naciągnięty bardzo dokładnie/brak jakichkolwiek zagniecień																			
4	Końcówki węża są obszyte ręcznie, zawinięte i wszyte pod taśmę Velcro																			
5	Taśma samoszczepna Velcro haczyk naszyta jest po zewnętrznej stronie kołnierza. 																			
6	Taśma samoszczepna Velcro pętka naszyta jest po zewnętrznej stronie kołnierza. 																			

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

7	<p>Taśmy samoszczepne Velcro wszyte są (maszynowo lub ręcznie) na odpowiedniej długości kołnierza za pomocą szwu łączącego zwykłego (jak na rysunkach w kryteriach 5 i 6)</p> 										
8	Szwy dobrze trzymające, mocne										
9	Końcówki nici opalone zapalniczką										
10	Stanowisko pracy uporządkowane tak, by nie było na blatach i podłodze resztek materiałów										
Rezultat 2: Zasady pobierania miary											
<i>Uwaga. Zapis może być uznany w innym brzmieniu pod warunkiem zgodności znaczeniowej i merytorycznej.</i>											
Wpisane:											
1	należy zmierzyć obwód szyi										
2	wykonać pomiar w pozycji stojącej, wyprostowanej pacjenta										
3	wykonać pomiar odległości od brody do wcięcia szyjnego mostka										

Rezultat 3: Instrukcja dla pacjenta dotyczący zakładania kołnierza

Uwaga. Zapis może być uznany w innym brzmieniu pod warunkiem zgodności znaczeniowej i merytorycznej.

Wpisane:

1	odpiąć rzep								
2	kołnierz ułożyć częścią wklęsłą pod żuchwą								
3	zapiąć rzep z tyłu szyi								

Rezultat 4: Instrukcja dotycząca eksploatacji i konserwacji kołnierza

Uwaga. Zapis może być uznany w innym brzmieniu pod warunkiem zgodności znaczeniowej i merytorycznej.

Wpisane:

1	należy: przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu								
2	należy: prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących								
3	nie wolno: dopuszczać do silnego zabrudzenia								
4	nie wolno: chlorować								
5	nie wolno: prasować								

Rezultat 5: Koszty wykonania kołnierzy									
W tabeli kalkulacyjnej w kolumnie 2 wpisane:									
1	cena wykonania jednego kołnierza przez zakład ortopedyczny: 26,72 zł lub 26,72								
2	cena wykonania jednego kołnierza zaproponowana przedstawicielowi po doliczeniu marży: 32,06 zł lub 32,06								
3	cena za wykonanie wszystkich kołnierzy wykonanych przez zakład ortopedyczny: 400,80 zł lub 400,80								
4	cena za wykonanie wszystkich kołnierzy zaproponowana przedstawicielowi: 480,90 zł lub 480,90								
5	całkowity zysk zakładu ortopedycznego: 80,10 zł lub 80,10								
Przebieg 1. Wykonanie rozkroju kołnierza Schanza									
<i>Uwaga! Zdający zgłosi zakończenie rozkroju przez podniesienie ręki, wówczas należy ocenić kryterium 4 i 6.</i>									
Zdający:									
1	przypiął szablon do pianki poliuretanowej szpilkami, odrysował szablon markerem na piance								
2	wyciął nożyczkami lub nożem tapicerskim wzór kołnierza według załączonego szablonu								
3	oszlifował piankę na szlifierce/wydrążarce tak, by powierzchnie kołnierza były gładkie bez nierówności								
4	zeszlifował końcówki zapięć kołnierza do grubości 1,5 cm (+/-0,5 cm) <i>Uwaga! Należy ocenić przed zszyciem kołnierza.</i>								
5	pozostałości pianki poliuretanowej usunął za pomocą suszarki lub sprężarki								
6	wyciął wąż ortopedyczny na długość 57 cm (+/-1 cm) <i>Uwaga! Należy ocenić przed zszyciem kołnierza.</i>								
7	wyciął taśmę samoszczepną Velcro pętelka o szerokości 5 cm i długości 15 cm (+/-1 cm)								
8	wyciął taśmę samoszczepną Velcro haczyk o szerokości 5 cm i długości 6 cm (+/- 1 cm)								
9	szlifował piankę w okularach ochronnych i rękawiczkach ochronnych								
10	wyłączył szlifierkę/wydrążarkę i maszynę z zasilania po zakończonej pracy								

Egzaminator

imię i nazwisko

data i czytelny podpis