

**Arkusz zawiera informacje prawnie  
chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu**

Układ graficzny © CKE 2016

**CKE** **CENTRALNA  
KOMISJA  
EGZAMINACYJNA**

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodontcji oraz epitezy twarzy**

Oznaczenie kwalifikacji: **Z.17**

Numer zadania: **01**

Wypełnia zdający

Miejsce na naklejkę z numerem  
PESEL i z kodem ośrodka

Numer PESEL zdającego\*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Z.17-01-17.06**

Czas trwania egzaminu: **180 minut**

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE  
Rok 2017  
CZEŚĆ PRAKTYCZNA**

**Instrukcja dla zdającego**

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na **KARCIE OCENY** w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
  - swój numer PESEL\*,
  - oznaczenie kwalifikacji,
  - numer zadania,
  - numer stanowiska.
3. **KARTĘ OCENY** przekaz zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

***Powodzenia!***

\* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

## **Zadanie egzaminacyjne**

Na otrzymanym modelu roboczym wykonaj górną protezę dziecięcą w fazie wosku zgodnie z zaleceniami lekarza zawartymi w Karcie laboratoryjnej i treścią zadania.

Dobierz właściwy drut do wykonania klamer grotowych.

Po dogięciu klamer zgłoś Przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego przez podniesienie ręki gotowość do ich oceny.

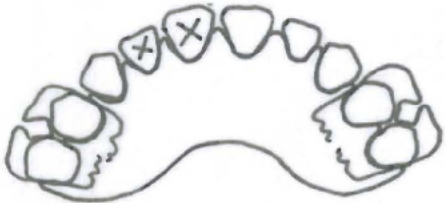
Zamocuj klamry na wcześniej uplastycznionej i dopasowanej płycie woskowej.

Ustaw zęby zgodnie z zasadami i zaleceniami lekarza.

Wymodeluj płytę protezy zgodnie z uwagami zawartymi w Karcie laboratoryjnej.

Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Zadanie wykonaj na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w niezbędne narzędzia i sprzęt.

<b>KARTA LABORATORYJNA</b>						
<b>NAZWISKO I IMIĘ</b>	<i>Nowak Milena</i>					
<b>ADRES</b>	<i>ul. Prosta 14 42-400 Zawiercie</i>					
<b>WIEK PACJENTA</b>	<i>5 lat</i>					
<b>RODZAJ PRACY</b>	<i>Górna proteza częściowa</i>					
<b>PROJEKT PRACY</b>	<b>STAN UZĘBIENIA</b>					
	<table style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 5px;"><b>55 54 53 52 51</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>61 62 63 64 65</b></td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 5px;"><b>85 84 83 82 81</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>71 72 73 74 75</b></td> </tr> </table>		<b>55 54 53 52 51</b>	<b>61 62 63 64 65</b>	<b>85 84 83 82 81</b>	<b>71 72 73 74 75</b>
<b>55 54 53 52 51</b>	<b>61 62 63 64 65</b>					
<b>85 84 83 82 81</b>	<b>71 72 73 74 75</b>					
<b>PLAN LECZENIA</b>						
<b>DATA</b>	<b>POSTĘPOWANIE KLINICZNE</b>	<b>POSTĘPOWANIE LABORATORYJNE</b>				
<i>26.06.2017 r.</i>	<i>pobranie wycisków</i>	<i>odlanie modeli roboczych</i>				
<i>5.07.2017 r.</i>	<i>oddanie pracy pacjentowi</i>	<i>wykonanie górnej protezy częściowej</i>				
<p><b>Uwagi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– płytę protezy dobrze dopasować do podłoża i wklinać w przestrzenie między zębami,</li> <li>– płytę na podniebieniu wymodelować do połowy wysokości zębów zachowanych,</li> <li>– klamry proszę dogiąć tak, aby nie podnosiły wysokości złączenia,</li> <li>– zęby ustawić z zachowaniem szpar,</li> <li>– zachodzenie zębów górnych na dolne powinno być minimalne.</li> </ul>						
		<i>Jan Kowalski</i> /podpis lekarza/				

**Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.**

**Ocenię podlegać będą 4 rezultaty:**

- dogięte klamry grotowe od strony podniebiennej,
- dogięte klamry grotowe od strony przedsionkowej,
- ustawione zęby,
- wymodelowana woskowa płyta protezy

oraz

przebieg wykonania protezy dziecięcej w fazie wosku.